

コラントッテ TAO ネックレス

# 取扱説明書



（製品についてのお問い合わせは下記まで）

**Colan Totte.**

製造販売元 株式会社コラントッテ  
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-10-26  
TEL(06)6258-7350 FAX(06)6258-7360  
www.colantotte.jp ☎0120-080-523

～TAO～

TAOとは中国哲学で説かれている  
「道」を表しています。

宇宙自然の普遍的法則や存在の根源、  
美や真実の根元などを広く意味する言葉です。

すべての真理と説かれ、  
悠然と変わることなく存在し、  
揺ぎないもの。

それがTAOなのです。

## ■コラントッテ TAO ネックレスは医療機器です。

コラントッテ TAO ネックレスは  
樹脂コーティング磁石を、独自のN極S極交互配列で配置した  
**医療機器**です。

医療機器として認証されている  
本物の健康ギアの効果を、体感  
できます。



独自のN極S極交互配列

## ■磁気の力で血行改善、コリを緩和。

ネックループ全体には磁気がコラントッテ独自の  
N極S極交互配列で10mm間隔に配置されています。  
これにより**磁力の広がり**が立体的に広範囲に働きかける  
ことができます。

コラントッテ TAO ネックレスは着けているだけで首  
や肩などのコリに効きます。

■お手入れ方法・その他 ※FINO、スリム ARIEは別ページを参照  
経年による変色・劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用  
いただくため、以下の点にご注意ください。

### ●お手入れの際は…

【ループ】金属部分を避けて、中性洗剤をご使用のうえ、やさしく手洗いし、汗・皮脂・汚れをこまめに洗い流してください。

【金属部分】汗・皮脂・汚れが付着したときは、やさしく拭き取ってください。汚れが目立ってきたときは、中性洗剤をご使用のうえ、こすらないようやさしく手洗いしてください。

ループ、金属部分とともに、手洗い後は、やさしく水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。

●長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。入浴時は外してください。

●製品に、化粧品類(スプレー・クリーム・香水含)が付着しないようにご注意ください。成分に含まれる油分及び揮発性成分などにより、製品が傷む恐れがあります。

●漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。

●シンナー・ベンジンなど有機溶剤でのお手入れはお避けください。

●高温のものへ近づけることはお避けください。

●着脱の際は、必ず留具の根元とネックループを持って行ってください。ループ本体のみを引っ張って取り外しを行わないでください。留具の着脱テストは行っておりますが、ご使用の仕方によっては、破損のおそれがありますので取り外しにはご注意ください。

●七宝の特性上、紫外線(太陽光・蛍光灯など)による変色・劣化は避けられません。ご了承ください。

●軽い力で着脱できる磁石式の留具のため、ジョイント外れによる落下にご注意ください。

■スリム ARIE お手入れ方法・その他  
経年による変色・劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用  
いただくため、以下の点にご注意ください。

### ●お手入れの際は…

【ループ】金属部分を避けて、中性洗剤をご使用のうえ、やさしく手洗いし、汗・皮脂・汚れをこまめに洗い流してください。

【金属部分】汗・皮脂・汚れが付着したときは、やさしく拭き取ってください。汚れが目立ってきたときは、中性洗剤をご使用のうえ、こすらないようやさしく手洗いしてください。

ループ、金属部分とともに、手洗い後は、やさしく水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。

●長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。入浴時は外してください。

●繊細なポリエチレン糸を使用して風合いを出していますので**乱暴な取り扱い**はお避けください。織維が毛羽立ちやすくなります。

●漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。

●シンナー・ベンジンなど有機溶剤でのお手入れはお避けください。

●高温のものへ近づけることはお避けください。

●取り外しの際は必ず留具を持って上下に外してください。

●留めたるのネックループ纖維への影響を防ぐために**留具本体**が動きやすくなっているので、その際は正常な位置に留具を戻してご使用ください。

●運動・衝撃などにより留具が外れる場合がございますので、ご注意ください。

■FINO お手入れ方法・その他  
経年による変色・劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用  
いただくため、以下の点にご注意ください。

●お手入れの際は、汗・皮脂・汚れが付着したときは、やさしく拭き取ってください。汚れが目立ってきたときは、中性洗剤をご使用のうえ、こすらないようやさしく手洗いしてください。手洗い後は、やさしく水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。

●長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。入浴時は外してください。

●繊細なポリエチレン糸を使用して風合いを出していますので**乱暴な取り扱い**はお避けください。織維が毛羽立ちやすくなります。

●漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。


●シンナー・ベンジンなど有機溶剤でのお手入れはお避けください。

●高温のものへ近づけることはお避けください。

●取り外しの際は必ず留具を持って上下に外してください。

●留めたるのネックループ纖維への影響を防ぐために**留具本体**が動きやすくなっているので、その際は正常な位置に留具を戻してご使用ください。

●運動・衝撃などにより留具が外れる場合がございますので、ご注意ください。

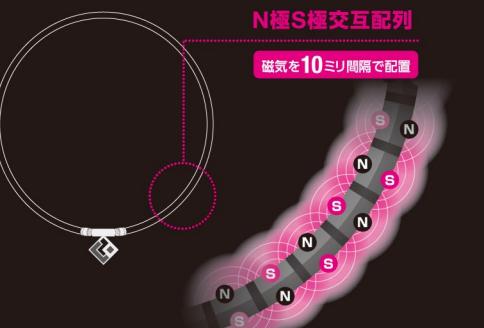

## ■製品仕様

Spec : 磁気を10mm間隔でN極S極交互配列  
Material : <コラントッテ TAO ネックレス / RAFFIシリーズ / AURAシリーズ / ARANシリーズ / VEGA II / スリム ARIE>  
樹脂コーティング磁石、ステンレス  
<コラントッテ TAO ネックレス FINO>  
樹脂コーティング磁石、ステンレス、ポリエチル

## ■ジョイント部分の取り外し方

### ●TAO ネックレス RAFFI シリーズ

留具の根元とループを持ち  
折るようにして外してください。



### ●TAO ネックレス AURA、ARANシリーズ

留具の根元とループを持ち  
折るようにして外してください。



### ●TAO ネックレス VEGA II

留具の根元とループを持ち  
折るようにして外してください。



## ■上記シリーズの留め方

凹側留具に平行に凸側留具をカチッと奥まで押し込んでください。(少し固めになっております)

## ■ジョイント部分の取り外し方

### ●TAO ネックレス スリム ARIE

留具の根元とループを持ち  
矢印の方向へ引張ってください。



### ■TAO ネックレス スリム ARIE の留め方

ジョイントの突起部をカチッと奥までめてください。



### ●TAO ネックレス FINO

必ずジョイント金具を  
持って右記のように  
上下に引っ張ってください。

